





ISTITUTO STUDI ODONTOLATICI

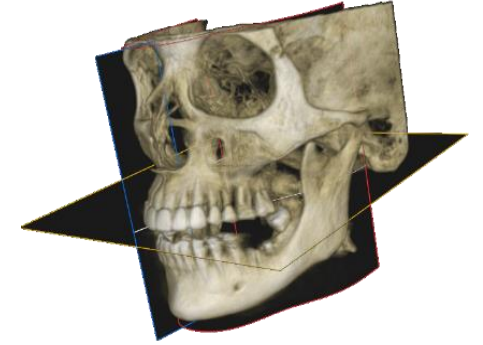


COMO INSTALAR EL VISOR DEL TOMOGRAFO Y VER TU TOMOGRAFIA

- CHECAMOS NUESTRO CORREO ELECTRONICO Y BUSCAMOS UN ARCHIVO QUE DIGA “WE TRANSFER”
- LO ABRIMOS Y VENDRÁ UN ENLACE DE DESCARGA, LE DAMOS CLIC

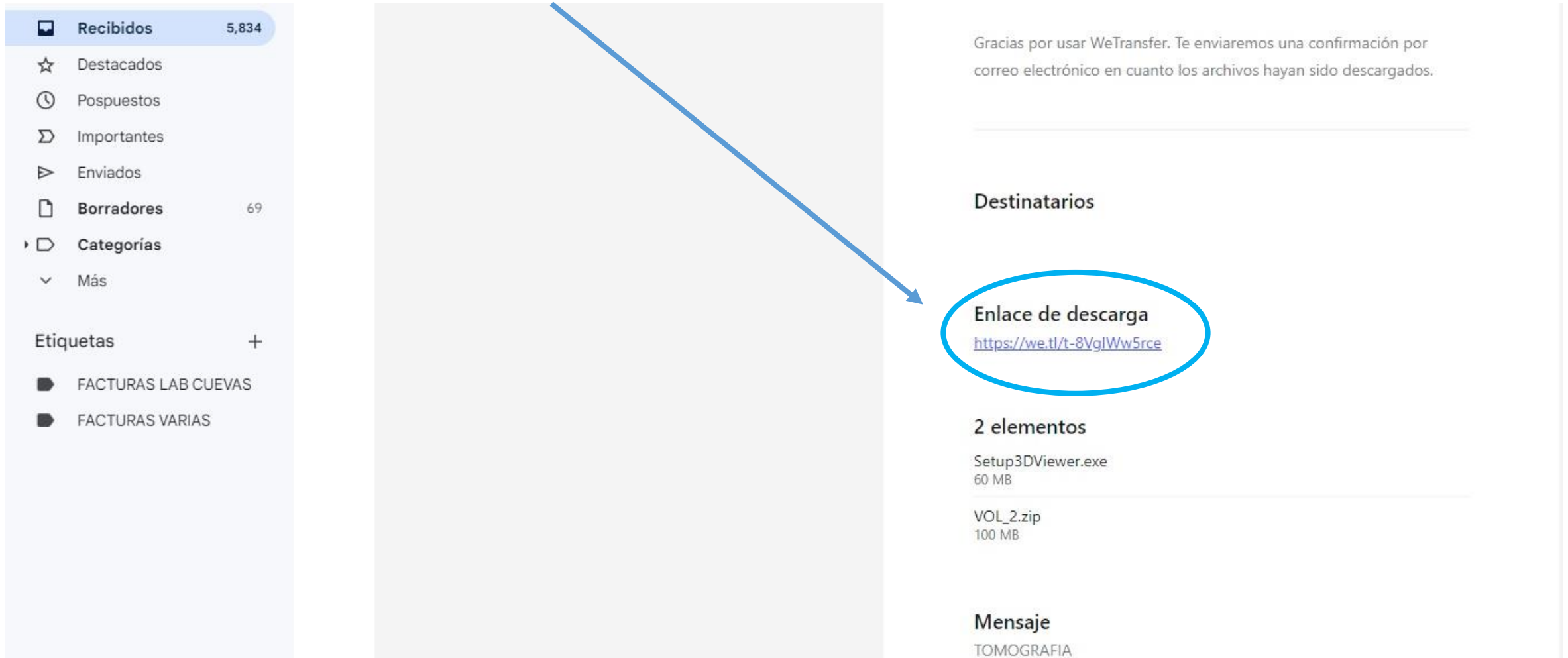


- NOS LLEVARA A LA PAGINA DE WE TRANSFER
- LE DAMOS CLIC DONDE DICE DESCARGAR

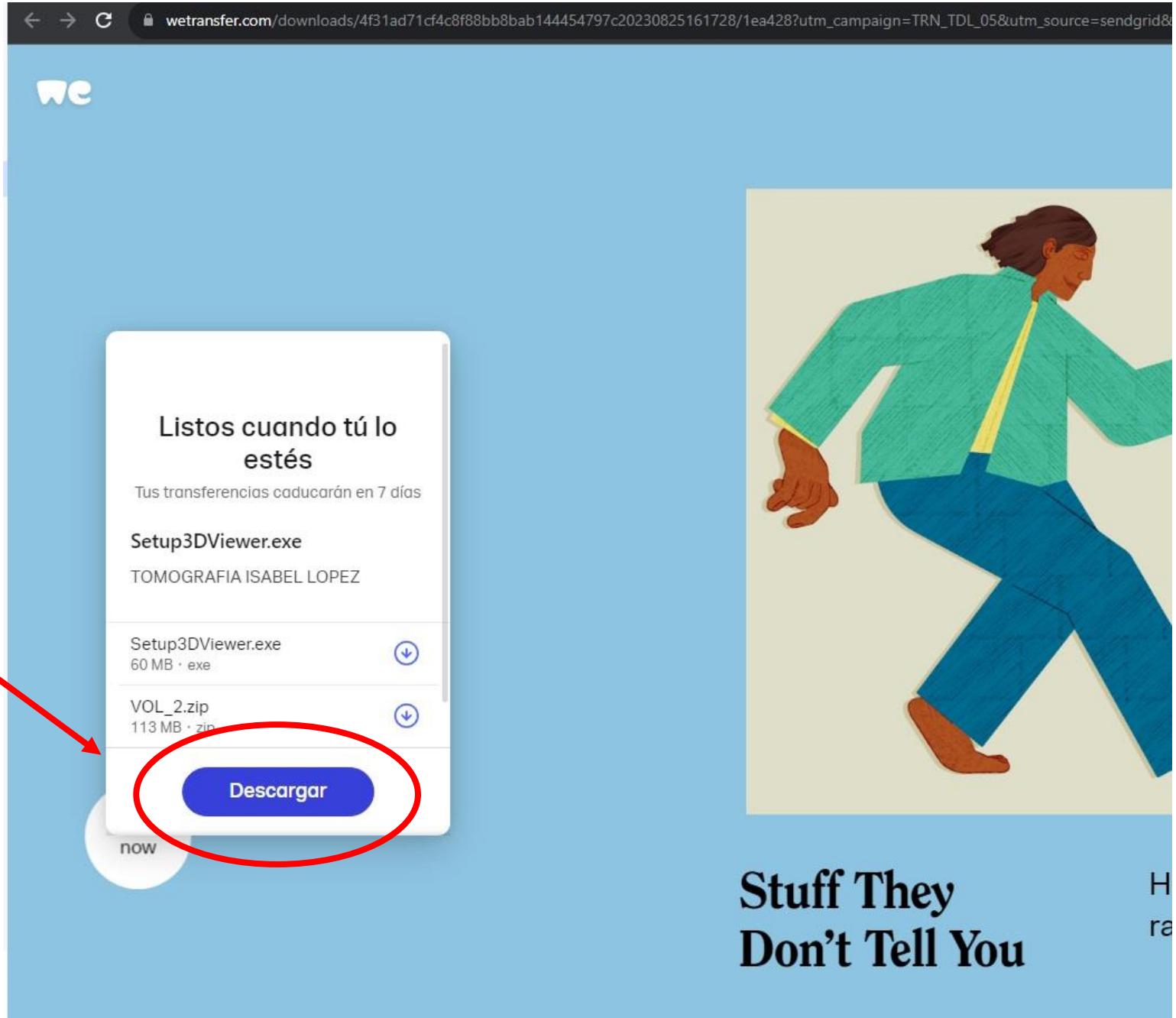


The screenshot shows the WeTransfer website interface. At the top, the browser address bar displays the URL: `wetransfer.com/downloads/4f31ad71cf4c8f88bb8bab144454797c20230825161728/1ea428?utm_campaign=TRN_TDL_05&utm_source=sendgrid&`. The WeTransfer logo is visible in the top left corner. A central white modal box contains the following information:

- Header: **Listos cuando tú lo estés**
- Text: Tus transferencias caducarán en 7 días
- File Name: **Setup3DViewer.exe**
- Sender: TOMOGRAFIA ISABEL LOPEZ
- File List:
 - Setup3DViewer.exe (60 MB · exe) with a download icon
 - VOL_2.zip (113 MB · zip) with a download icon
- Bottom Button: A blue button labeled **Descargar**, which is circled in red.

A red arrow points from the text "LE DAMOS CLIC DONDE DICE DESCARGAR" to the "Descargar" button. Below the modal, a "now" label is partially visible. On the right side of the page, there is an illustration of a person in a green jacket and blue pants running, and the text "Stuff They Don't Tell You" is displayed at the bottom.

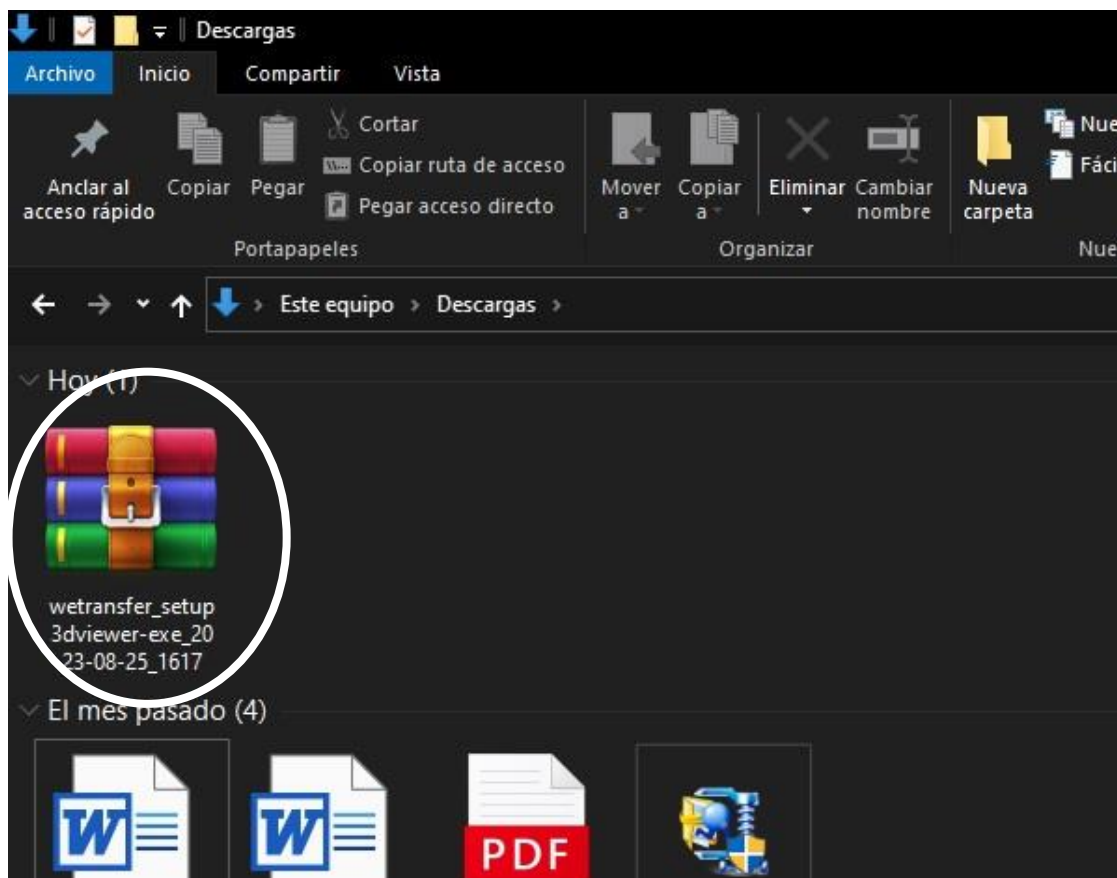


- UNA VEZ TERMINADA LA DESCARGA, EL ELEMENTO APARECERA EN NUESTRA CARPETA DE DESCARGAS COMO UN ARCHIVO COMPRIMIDO

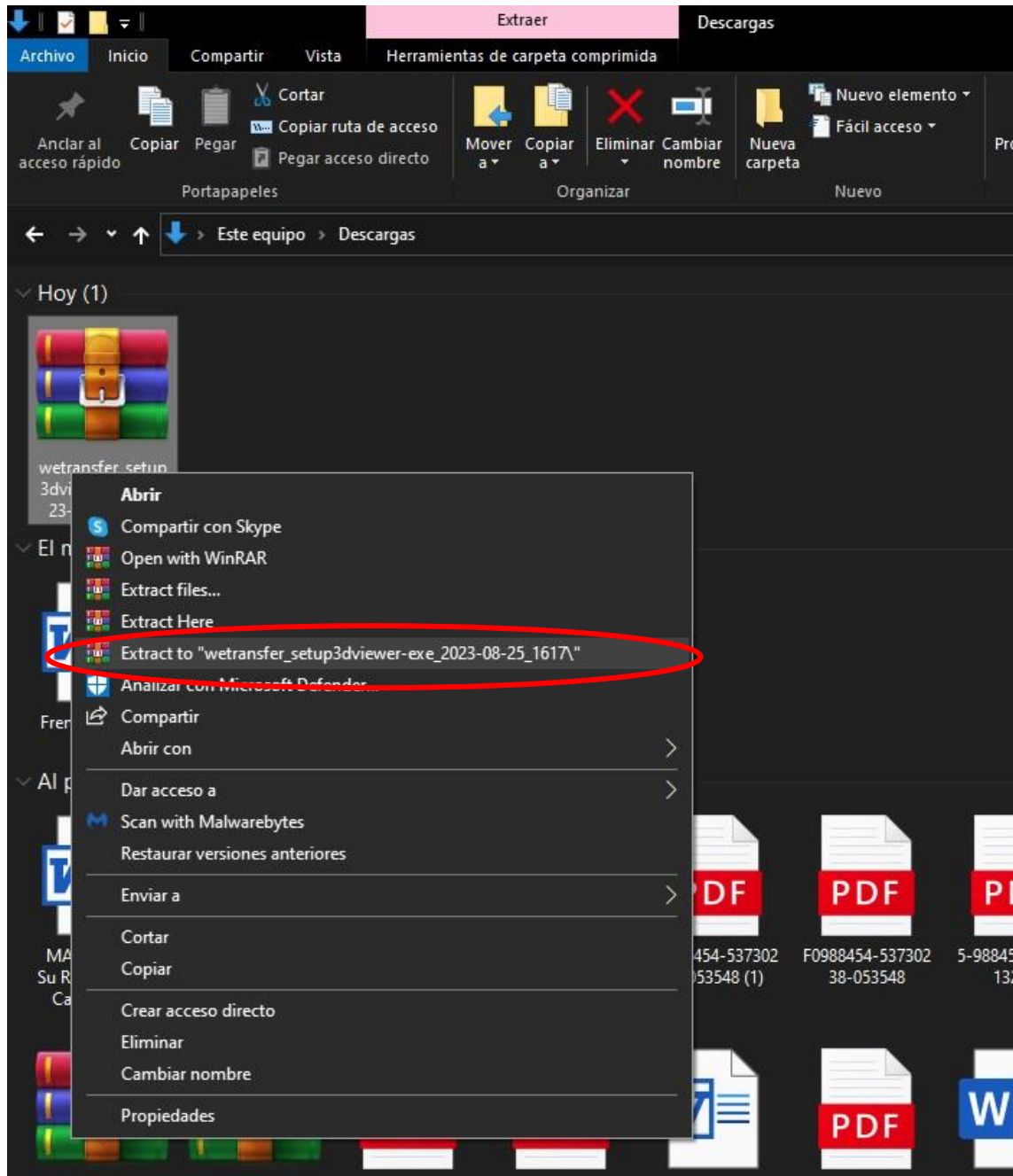


- LO SELECCIONAMOS Y DAMOS CLIC DERECHO
- SI TENEMOS EL PROGRAMA DE WIN RAR, BUSCAMOS EL APARTADO QUE DIGA EXTRAER O EXTRACT TO“WE TRANSFER ...”, Y DAMOS CLIC
- SI NO TENEMOS EL PROGRAMA DE WIN RAR, BUSCAMOS EL APARTADO QUE DICE EXTRAER TODO Y DAMOS CLIC


EN LA MISMA CARPETA DE DESCARGAS APARECERA OTRA CARPETA CON EL MISMO NOMBRE DEL ARCHIVO COMPRIMIDO

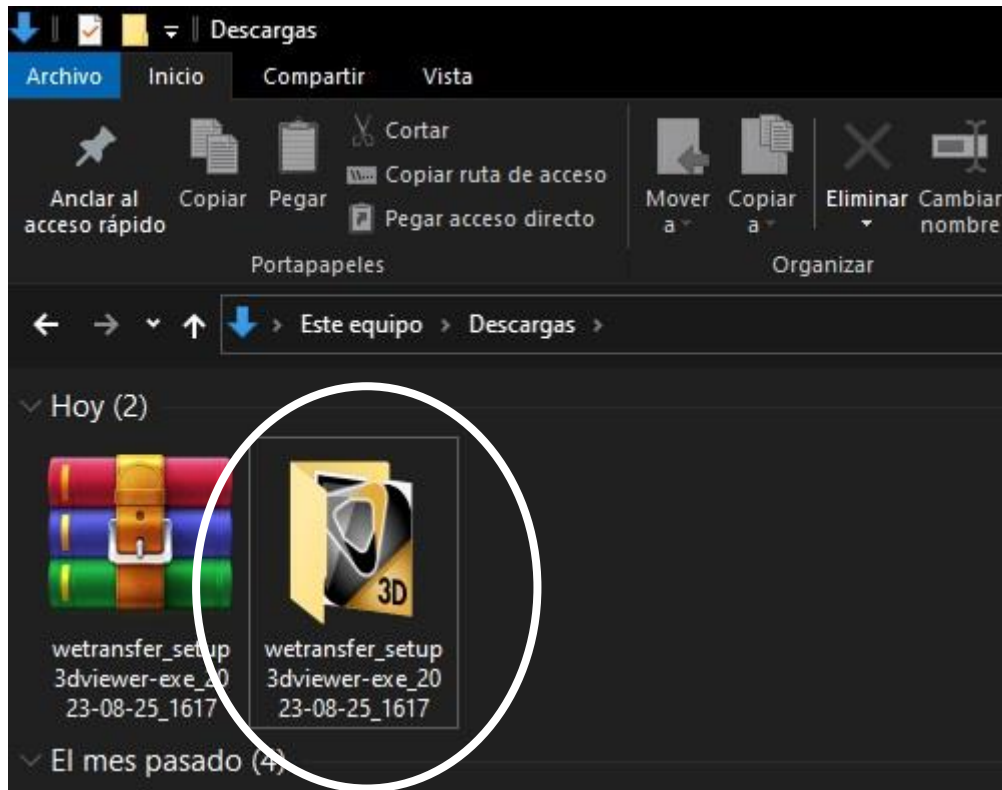

- LE DAMOS DOBLE CLIC A ESA CARPETA Y NOS APARECERA DOS ELEMENTOS: UN ARCHIVO COMPRIMIDO Y EL VISOR

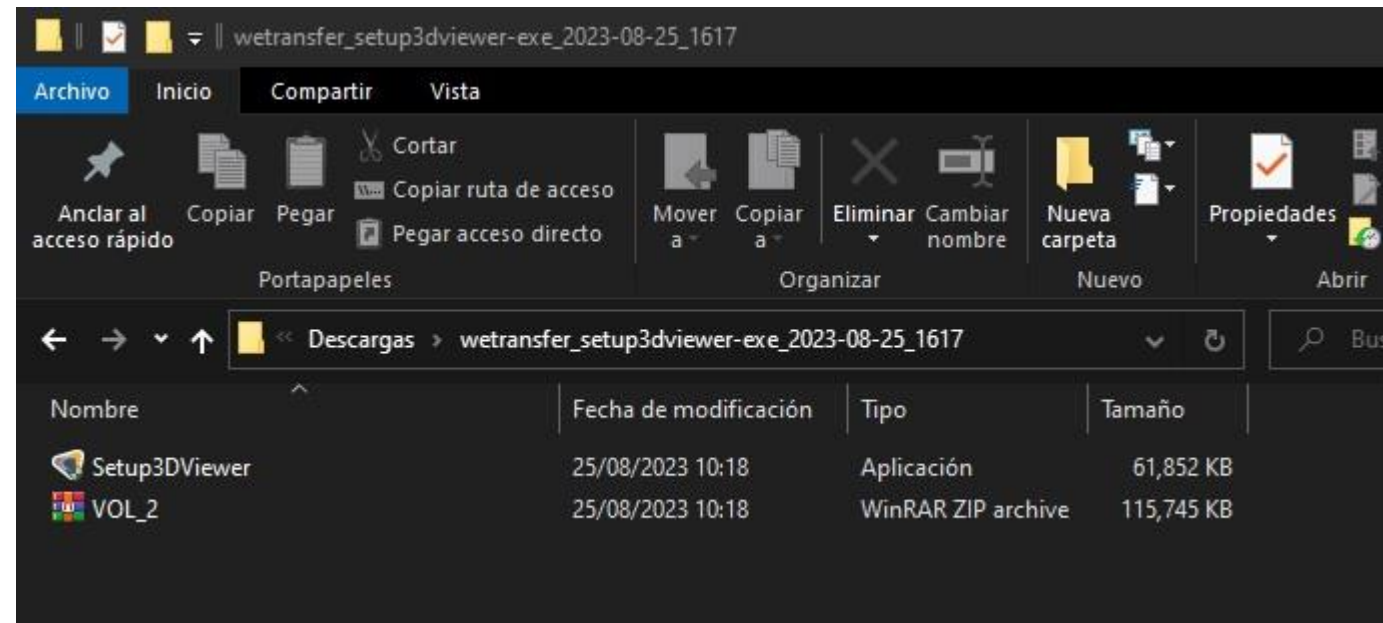


- IGUAL QUE LA VES PASADA, TENEMOS QUE DESCOMPRIMIR EL ARCHIVO.
- LO SELECCIONAMOS Y DAMOS CLIC DERECHO
- SI TENEMOS EL PROGRAMA DE WIN RAR, BUSCAMOS EL APARTADO QUE DIGA EXTRAER O EXTRACT TO "VOL...", Y DAMOS CLIC
- SI NO TENEMOS EL PROGRAMA DE WIN RAR, BUSCAMOS EL APARTADO QUE DICE EXTRAER TODO Y DAMOS CLIC

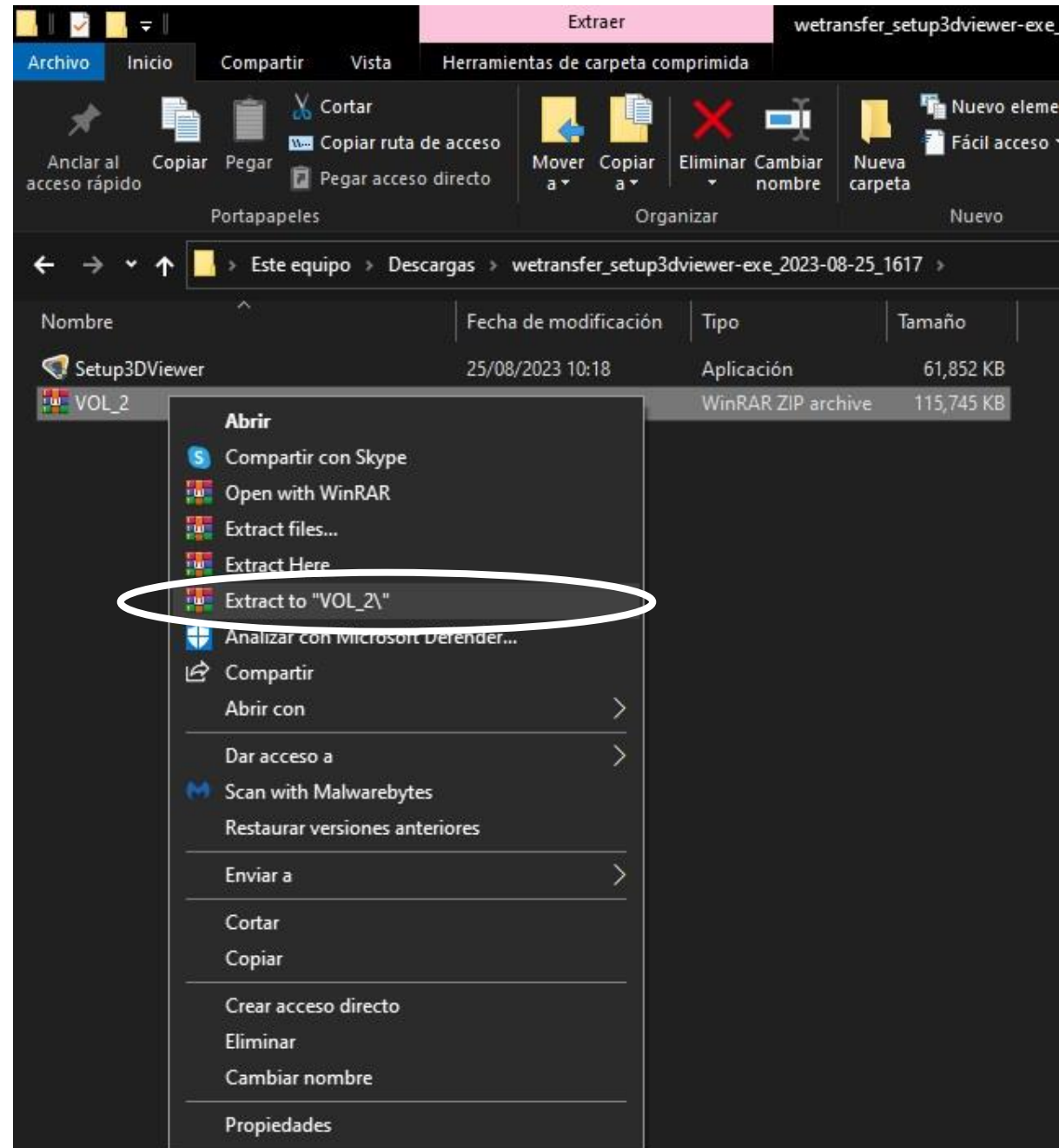

- UNA VEZ DESCOMPRIMIDO, EN LA MISMA CARPETA APARECERAN TRES ELEMENTOS:



- UNA CARPETA CON EL TITULO DE VOL ...
- EL PROGRAMA DEL VISOR
- UNA CARPETA CON ARCHIVOS COMPRIMIDOS

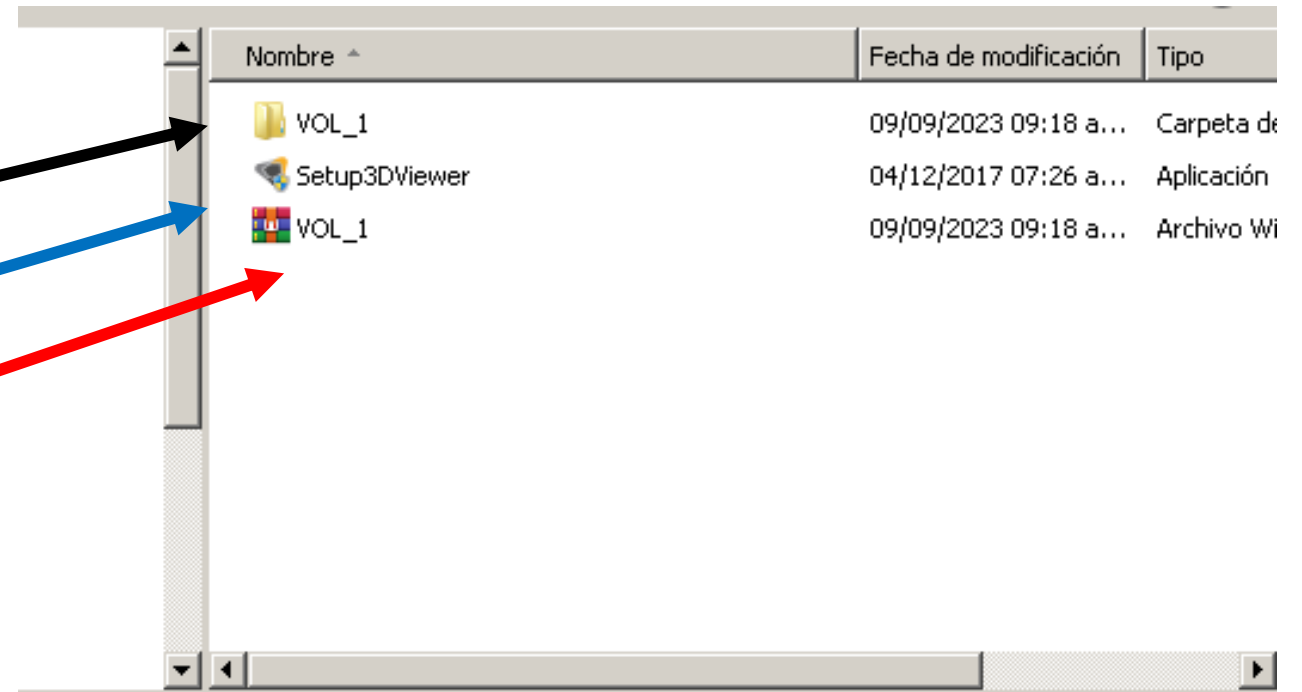

Nombre	Fecha de modificación	Tipo
VOL_1	09/09/2023 09:18 a...	Carpeta de
Setup3DViewer	04/12/2017 07:26 a...	Aplicación
VOL_1	09/09/2023 09:18 a...	Archivo Wi


FORMA DE INSTALAR EL VISOR

- PARA INSTALAR EL VISOR
LE DAMOS DOBLE CLIC
EN EL ICONO
Setup3DVisor

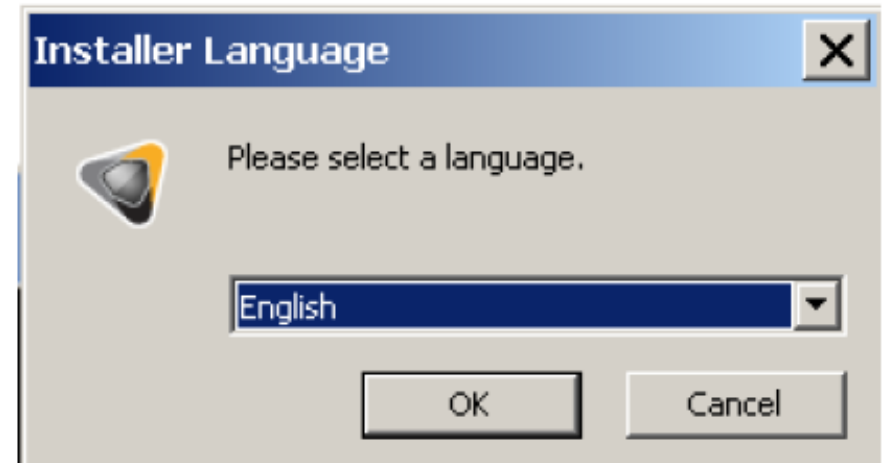
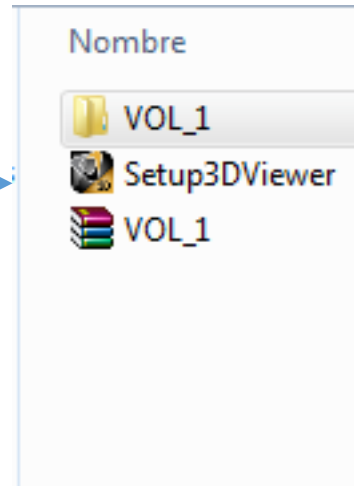


SELECCIONAMOS EL LENGUAJE EN
ESPAÑOL


- NOS APARECERA UNA PANTALLA DE INICIO DE INSTALACIÓN
- LE DAMOS CLIC EN DONDE DICE SIGUIENTE

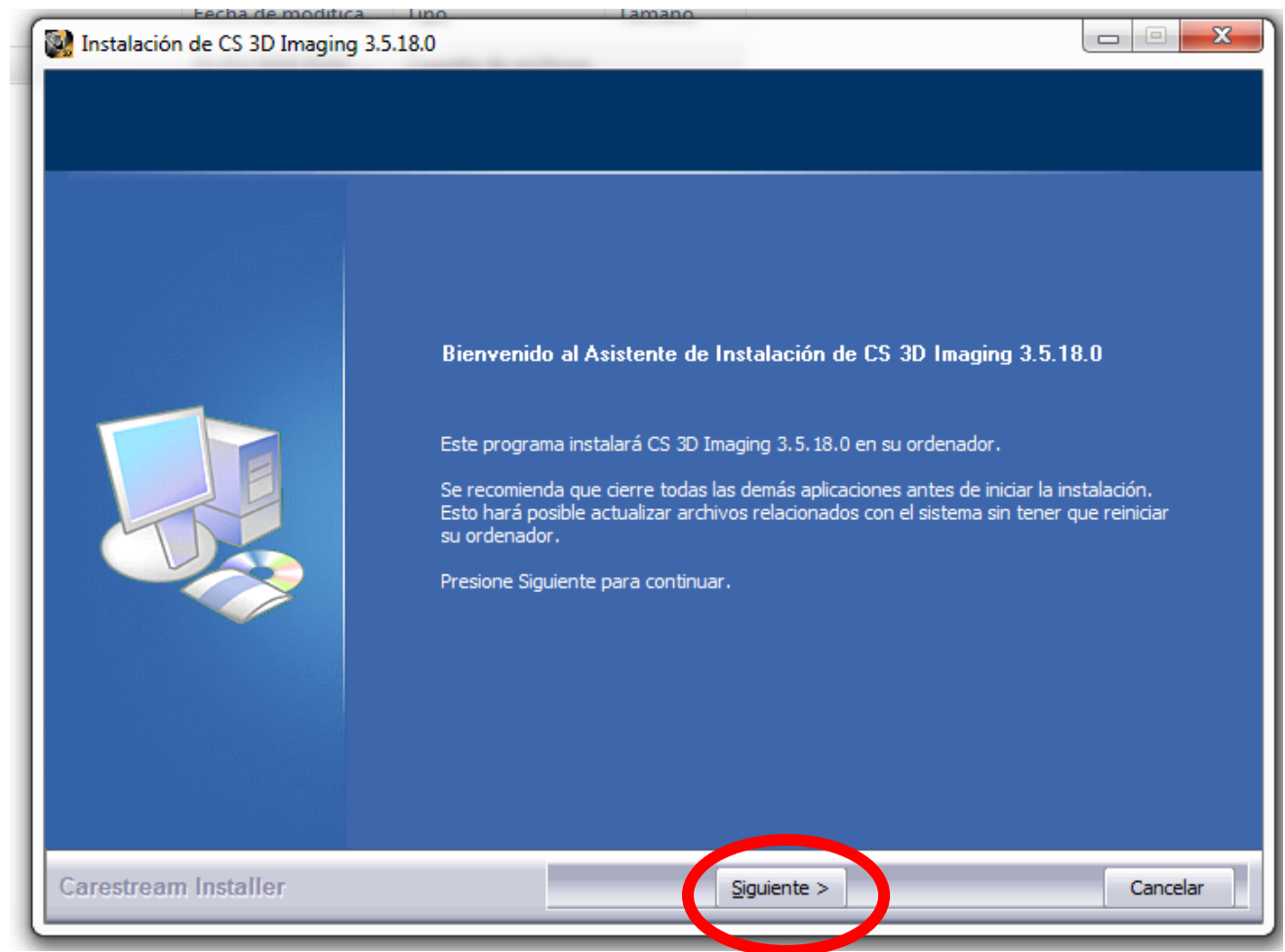


- SEGUIR LA INSTALACION DEL PROGRAMA Y SEGUIR LAS INDICACIONES DE LA INSTALACION .
- ESCOGEMOS EL MODO DE APLICACIÓN “CENTRO RADIOLOGICO”
- EN EL NIVEL DE APLICACION ESCOGEMOS EL MODO “AVANZADO”

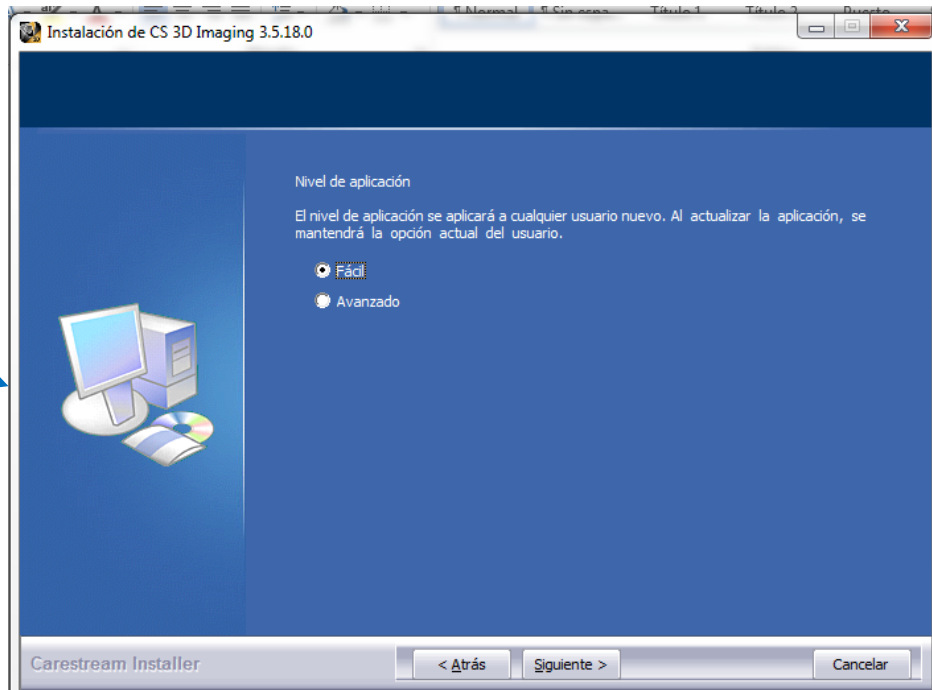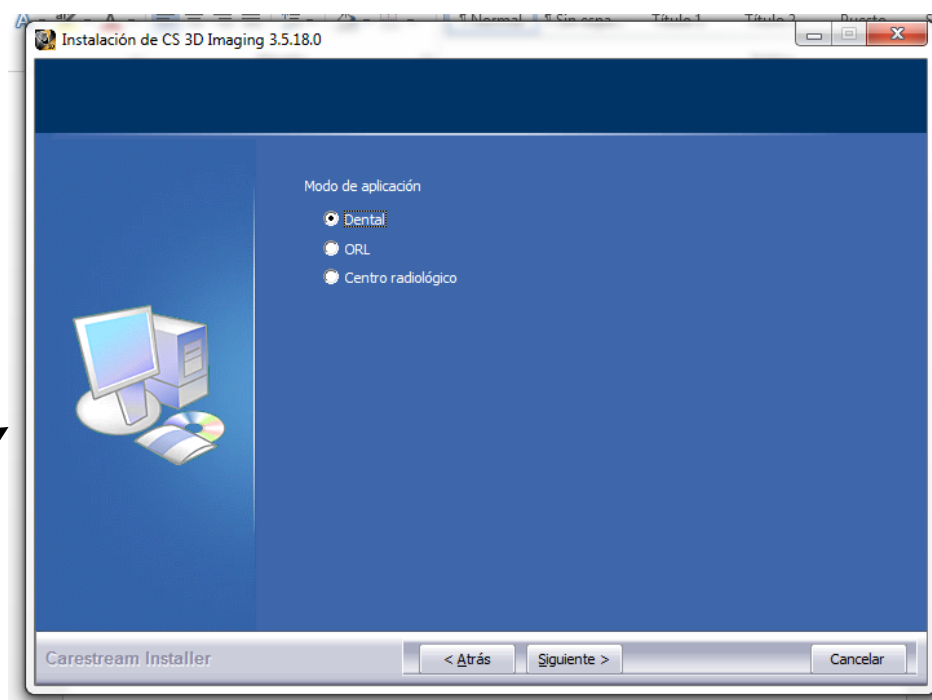


INSTALAR EL PROGRAMA

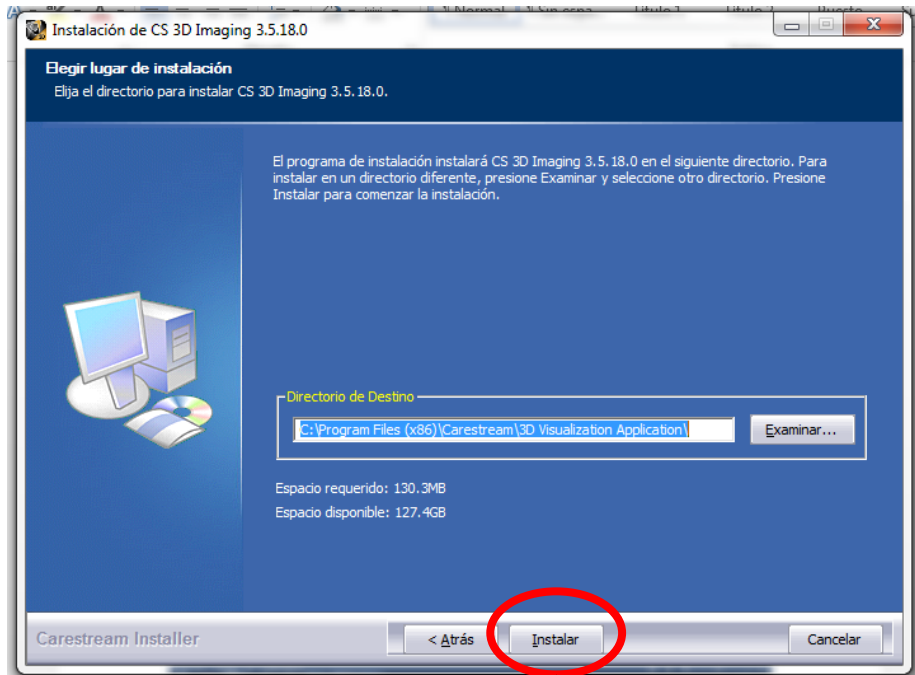

LE DAMOS CLIC DONDE DICE INSTALAR

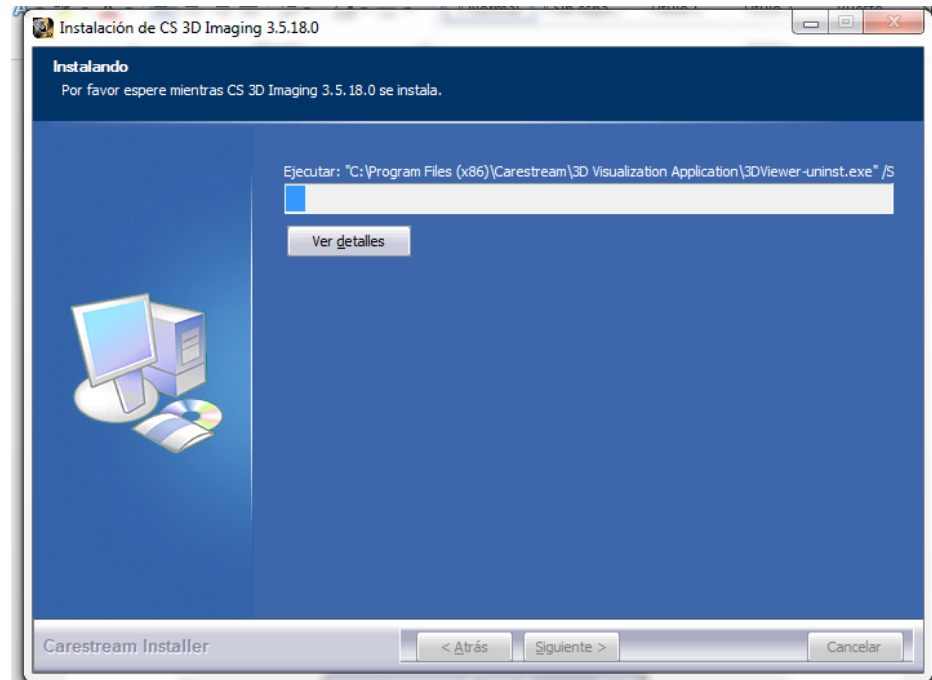

ESPERAMOS A QUE SE INSTALE EL PROGRAMA

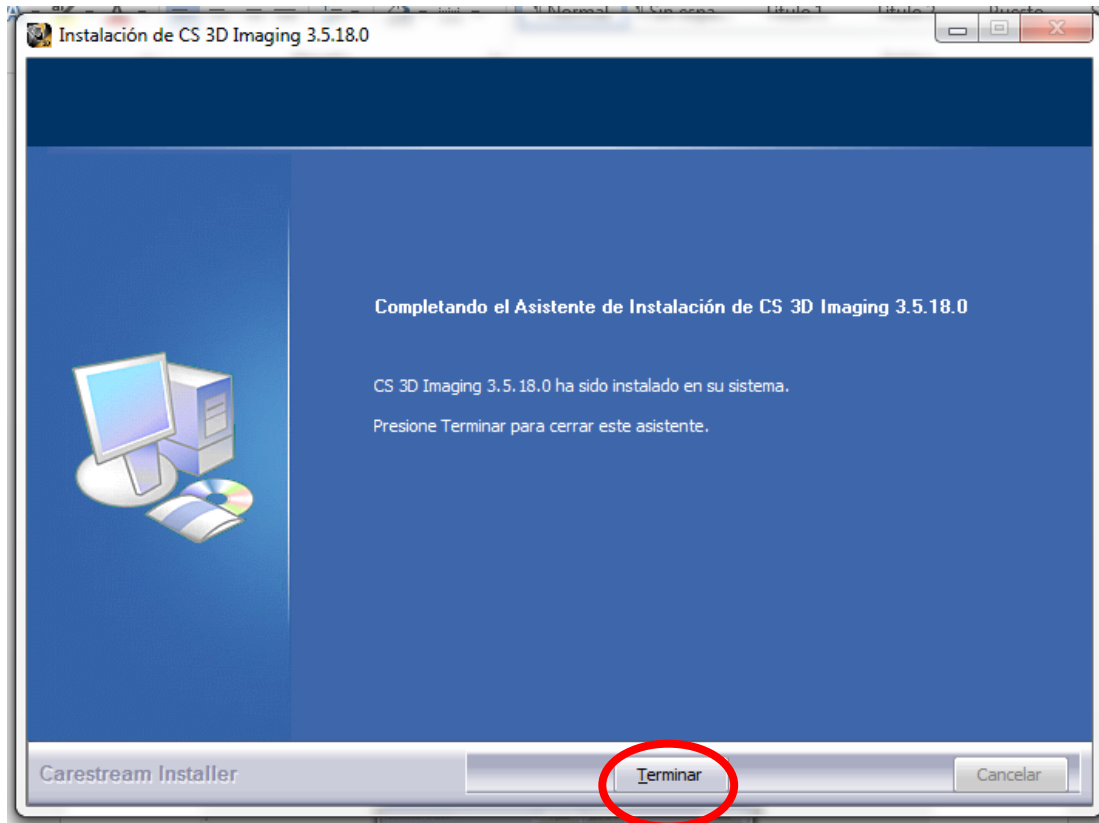


UNA VEZ COMPLETADO, LE DAMOS CLIC EN DONDE DICE TERMINAR


EN EL ESCRITORIO DE LA COMPUTADORA, APARECERA EL ICONO DEL Setup3DVisor YA INSTALADO

PARA VER EL ARCHIVO DE LA TOMOGRAFIA


- UNA VEZ INSTALADO EL VISOR, REGRESAMOS DONDE ESTAN TRES ELEMENTOS DE LA USB.
- LE DAMOS DOBLE DONDE ESTA LA CARPETA QUE DICE “VOL ...”

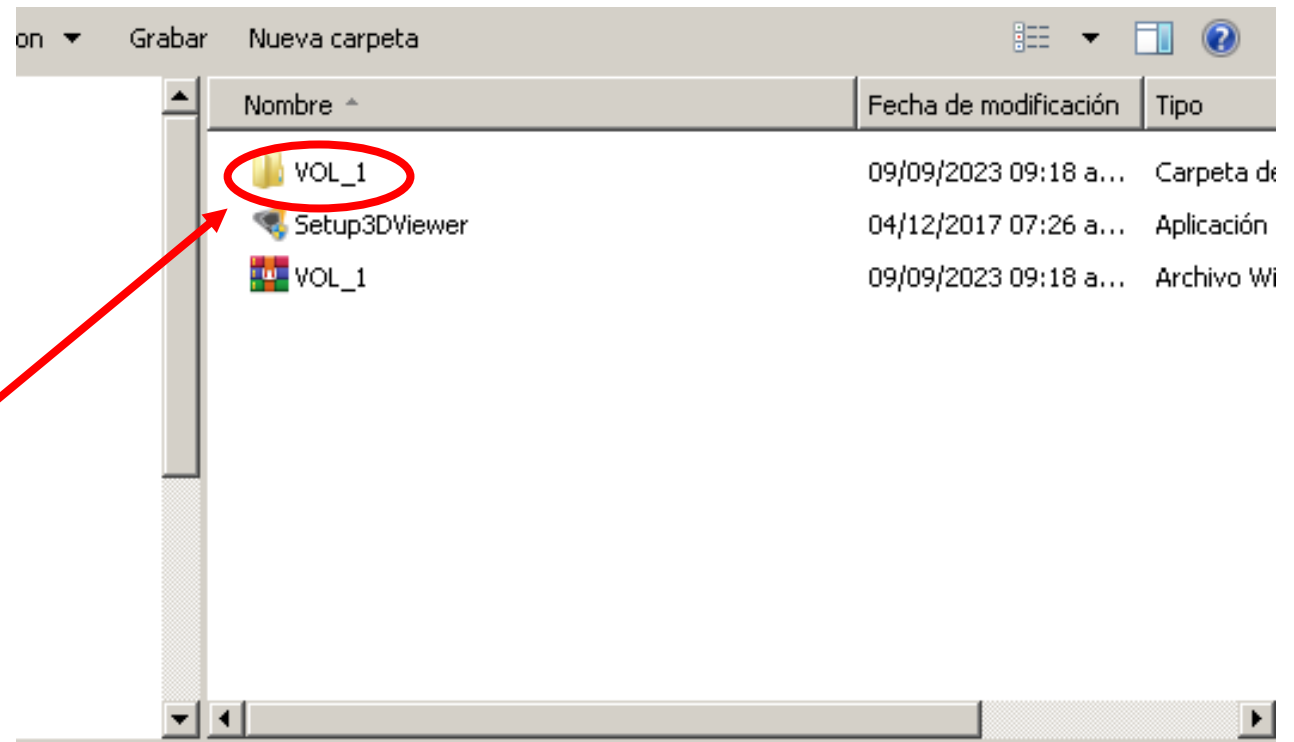


- NOS APARECERA UNA PANTALLA CON DOS CARPETAS Y VARIOS ARCHIVOS

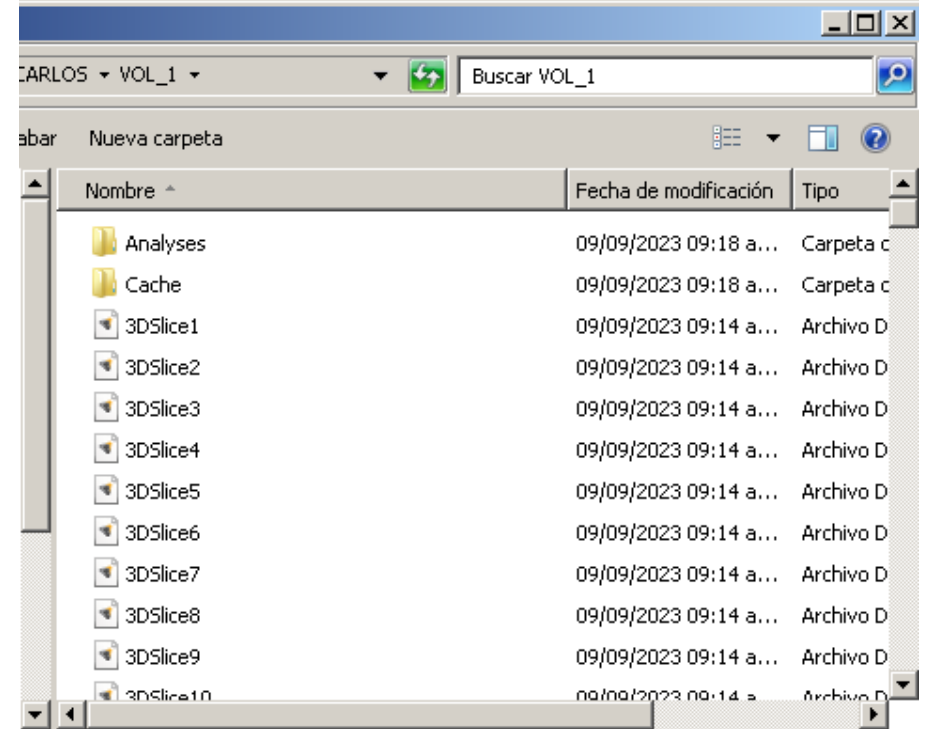


- SELECCIONAMOS UNO DE LOS ARCHIVOS

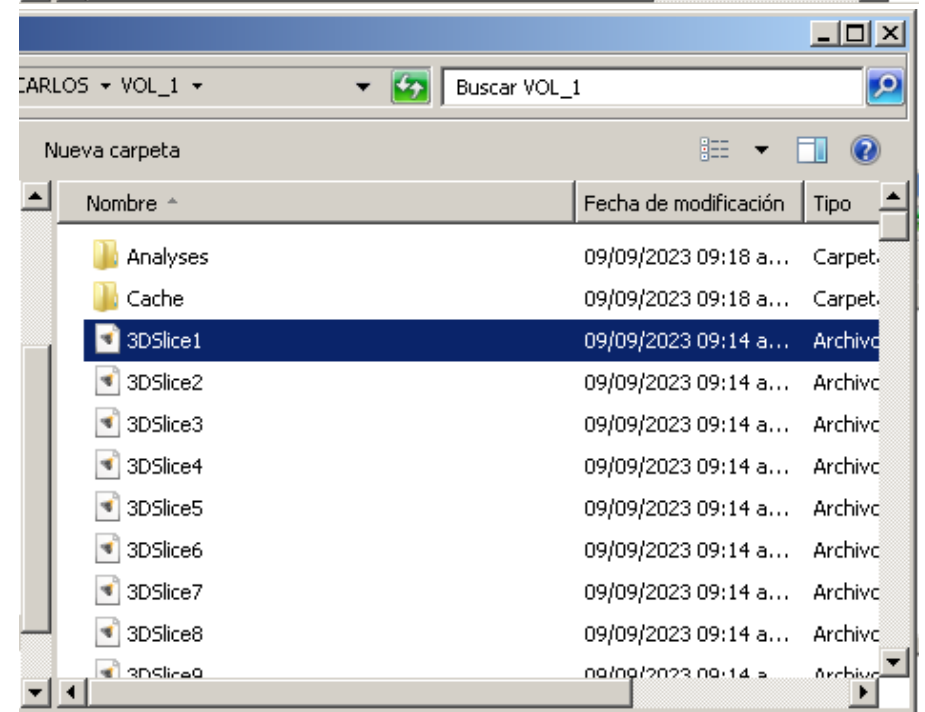

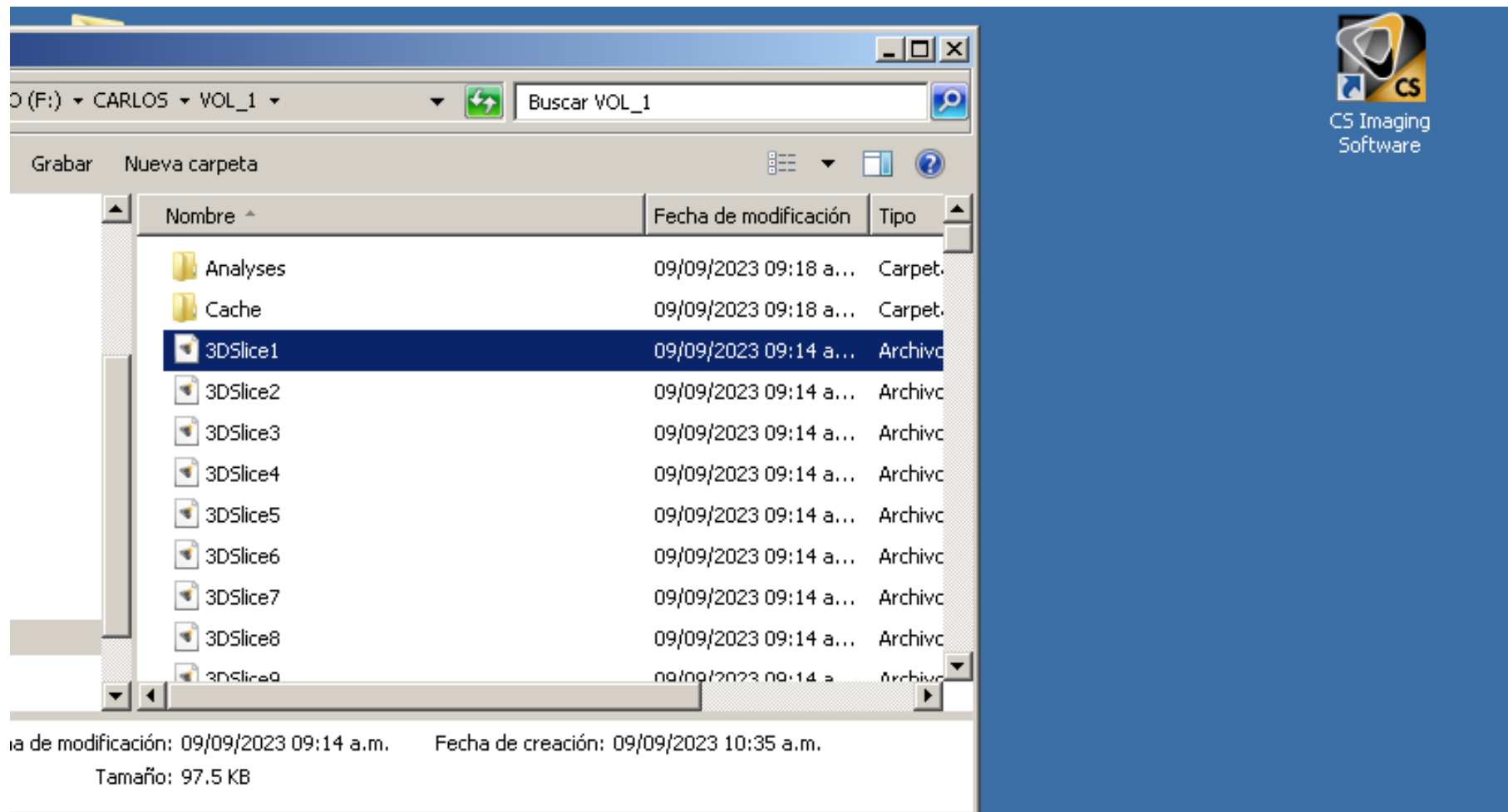


EL ARCHIVO SELECCIONADO LO ARRASTRAMOS AL ICONO
DEL VISOR

LE DAMOS UNOS SEGUNDOS

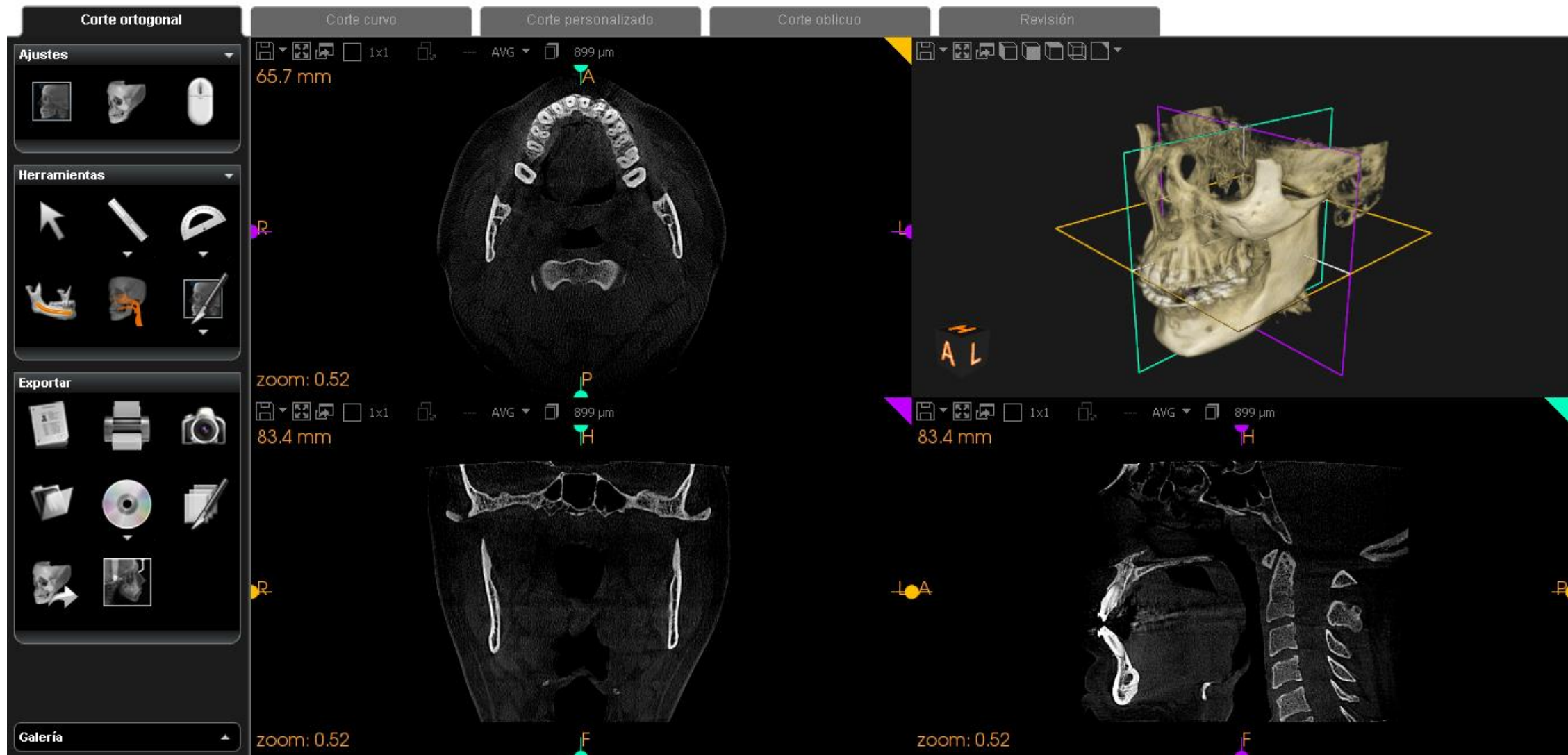


NOS APARECERA DE ESTA FORMA LA PANTALLA DE INICIO

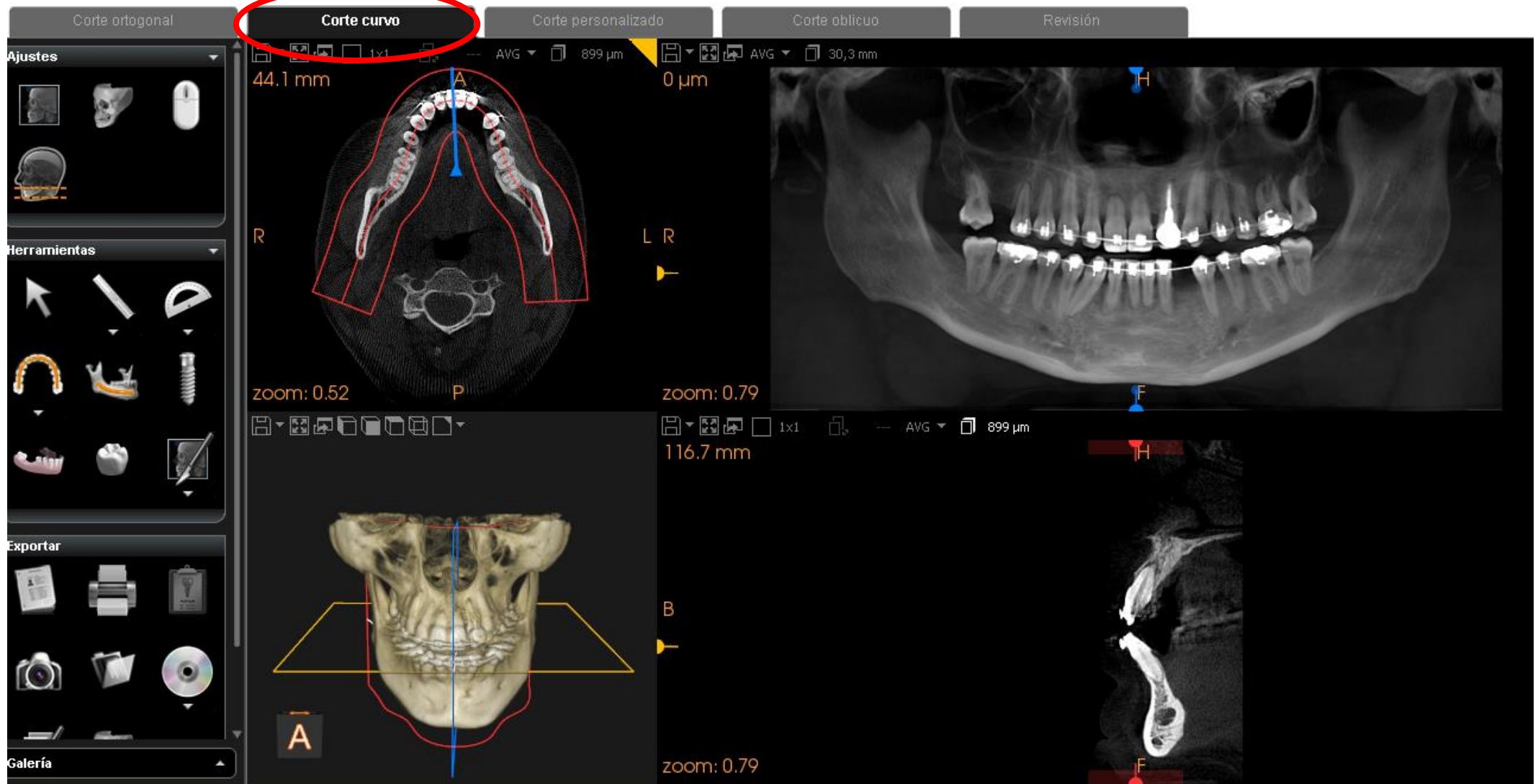

LE DAMOS CLIC EN DONDE DICE CORTE CURVO



EN ALGUNAS VECES PUEDE APARECER ASÍ LA PANORAMICA, PARA VERLA COMPLETA LE DAMOS CLIC DONDE DICE AJUSTAR INTEGRACION

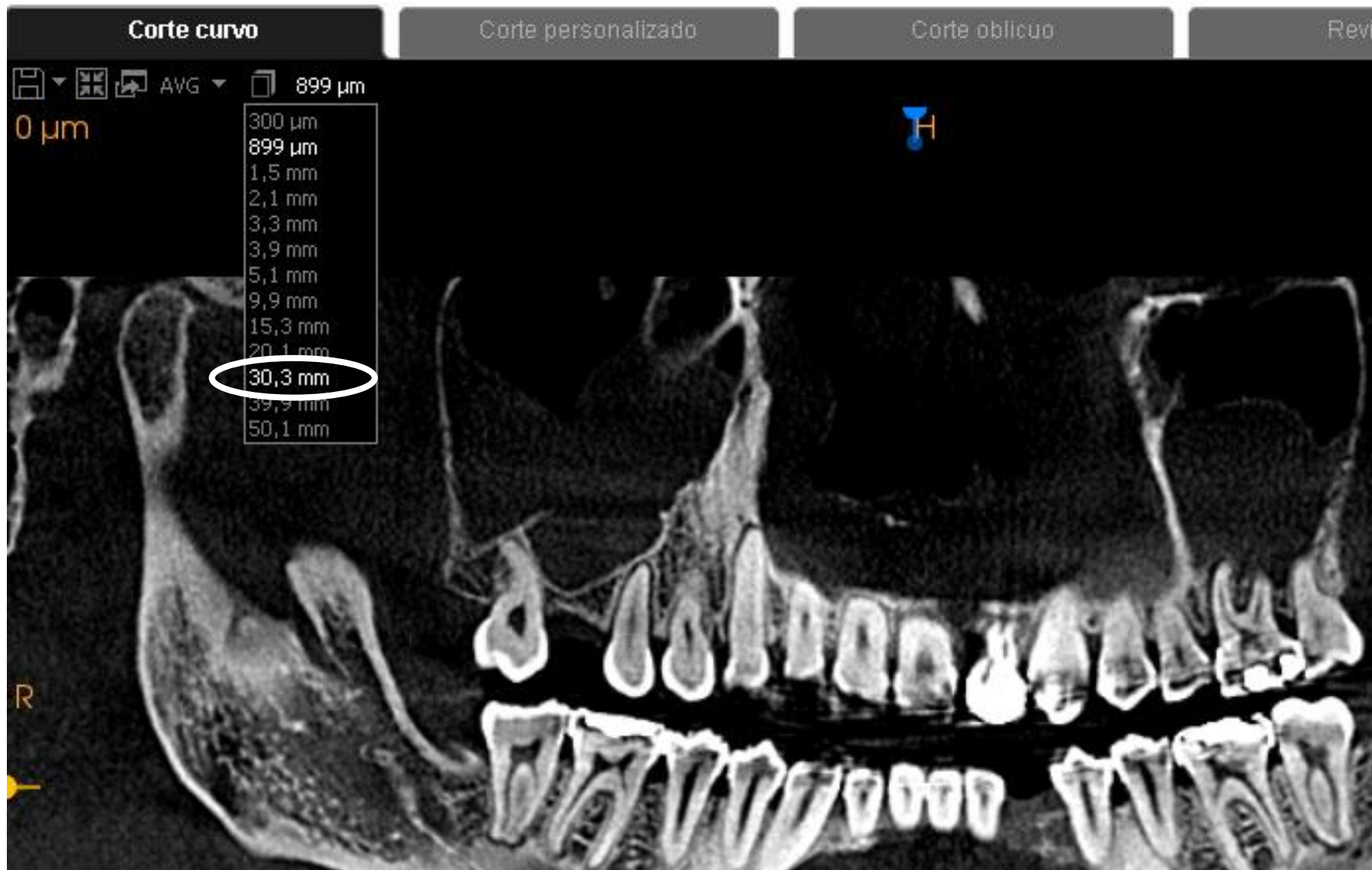

LE DAMOS CLIC DONDE DICE 30.3 MM Y EN AUTOMATICO SE VA AJUSTAR LA IMAGEN PANORAMICA

Corte curvo


Corte personalizado

Corte oblicuo


Revisión

AVG 30,3 mm


0 μ m

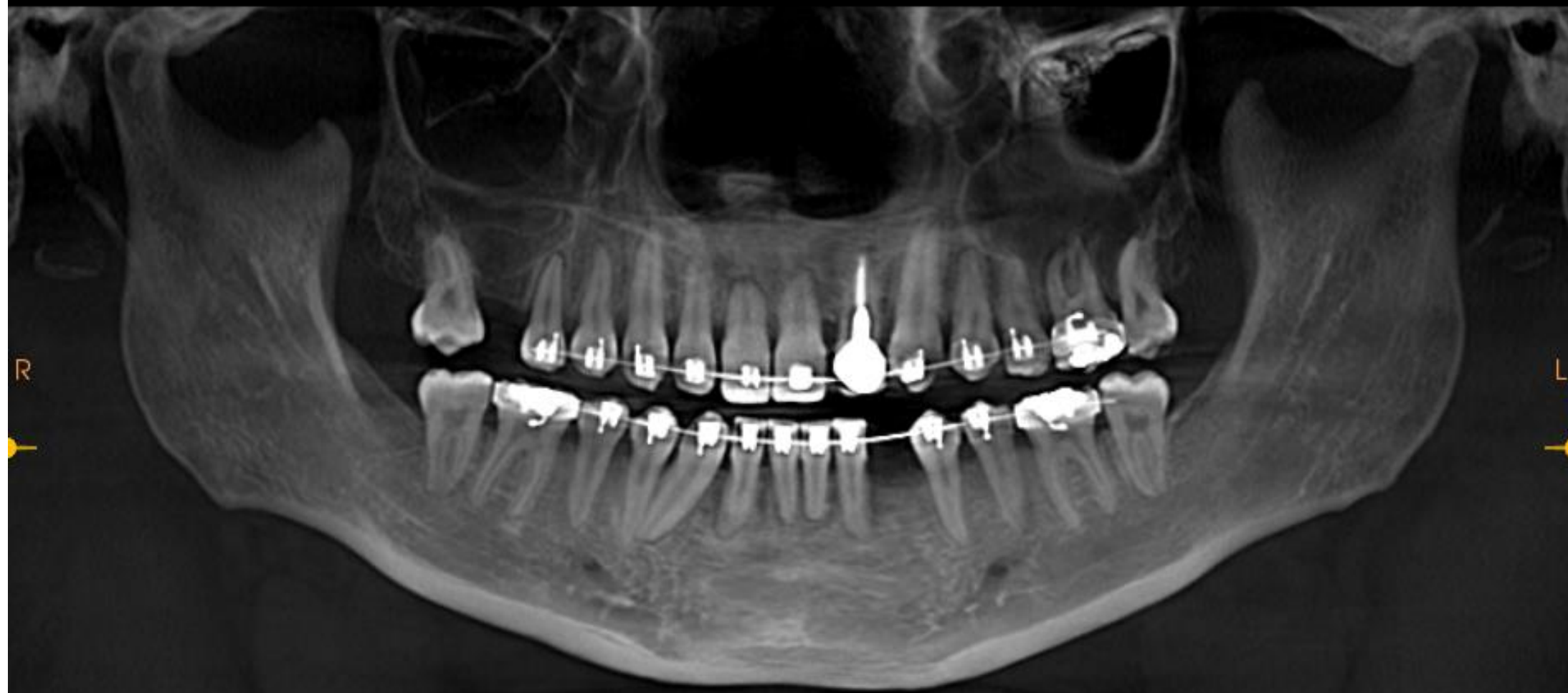


En el caso de que no se
llegue ver la imagen 3D

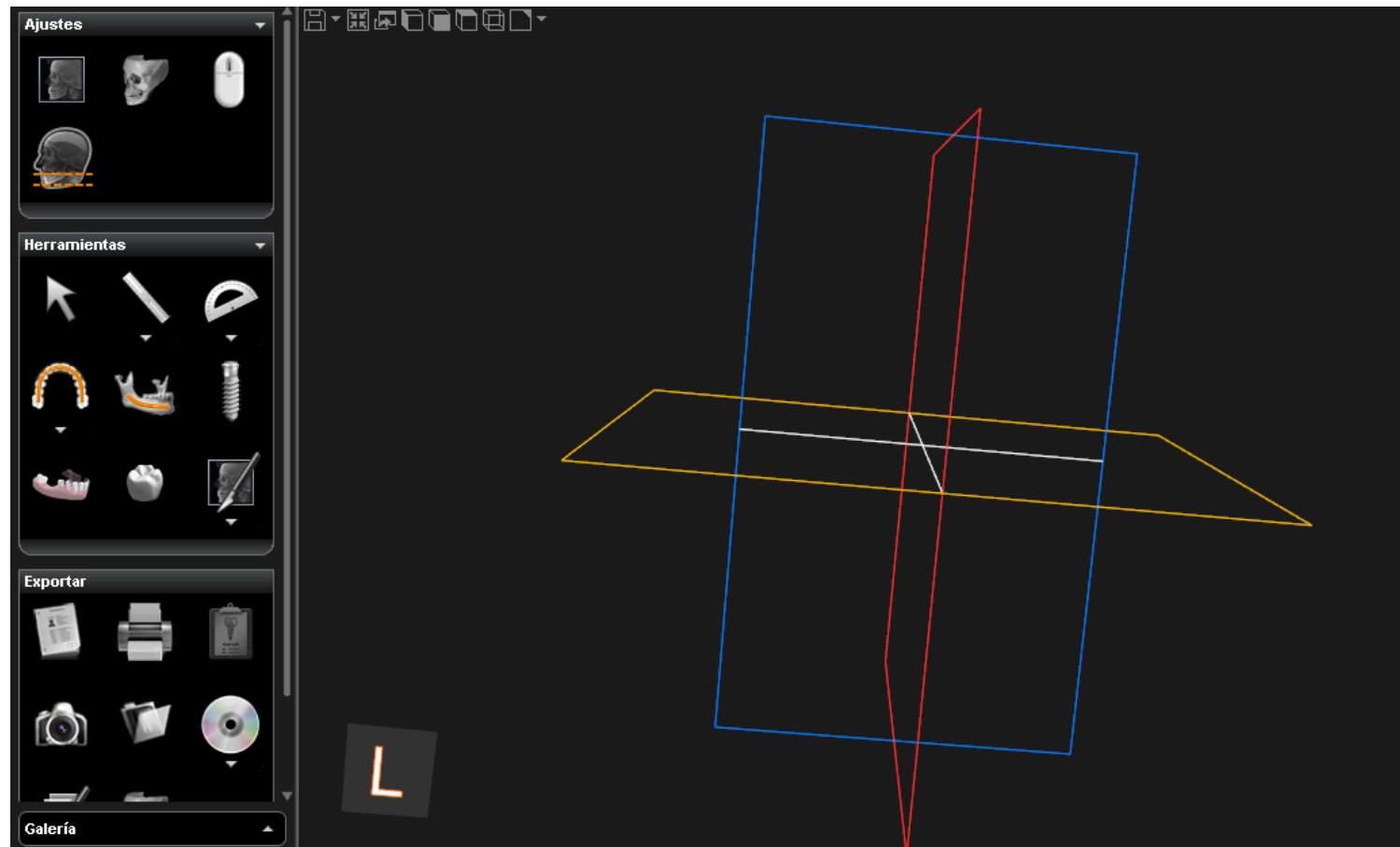


- DE LADO SUPERIOR DERECHO VERA UN LOGO DE UNOS ENGRANES Y LE DAMOS CLIC

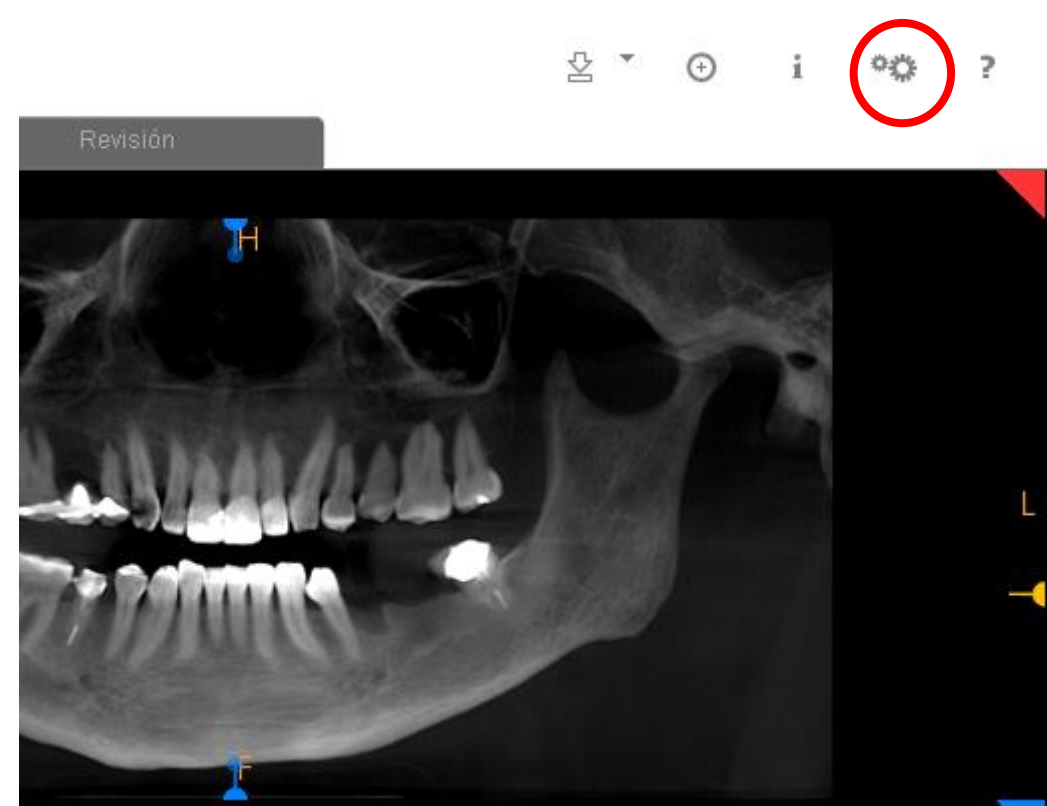

- NOS MOSTRARA EL MENU DE CONFIGURACIÓN.
- LE DAMOS CLIC DONDE TIENE LA IMAGEN DE UN CRANEO

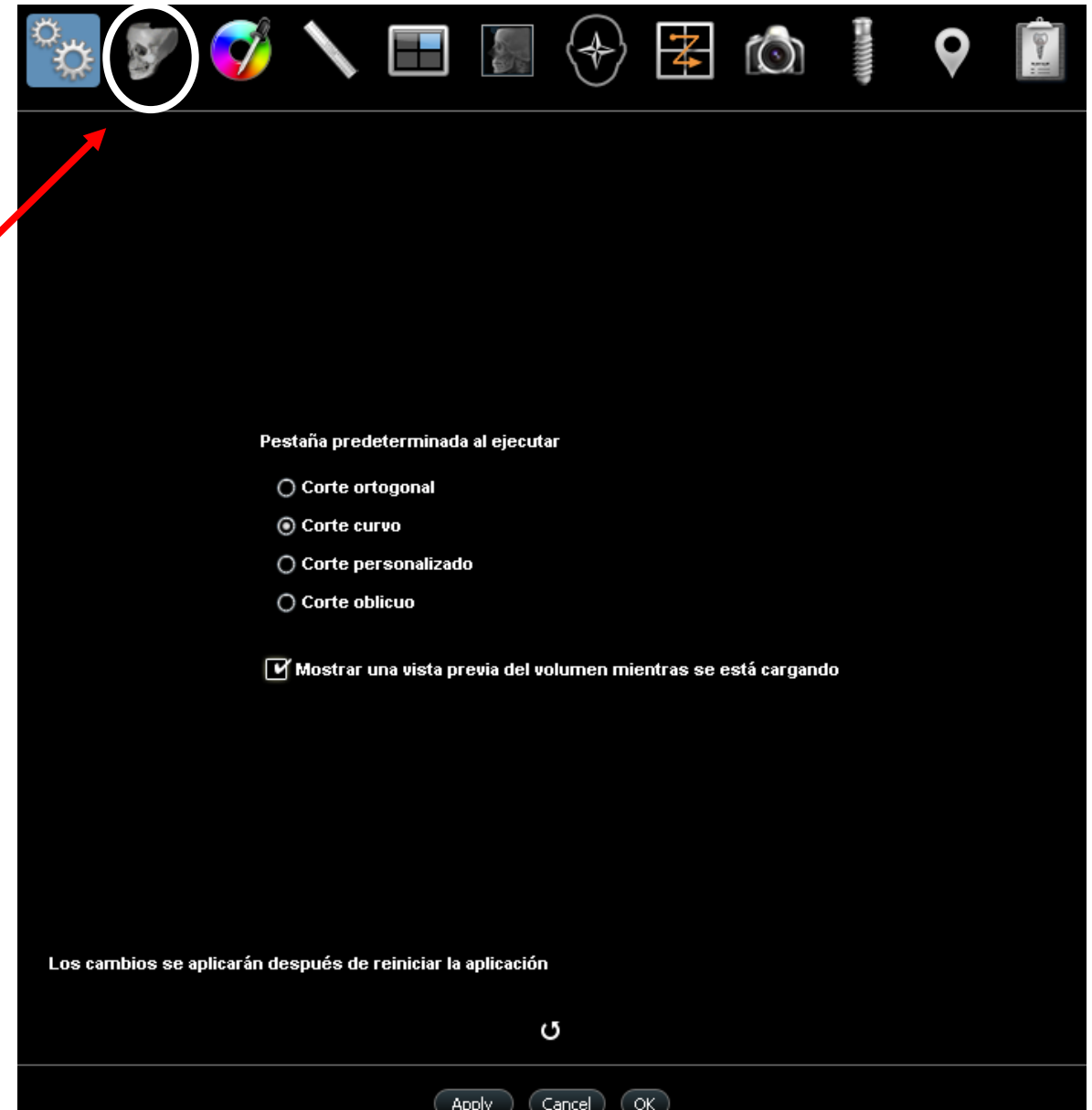

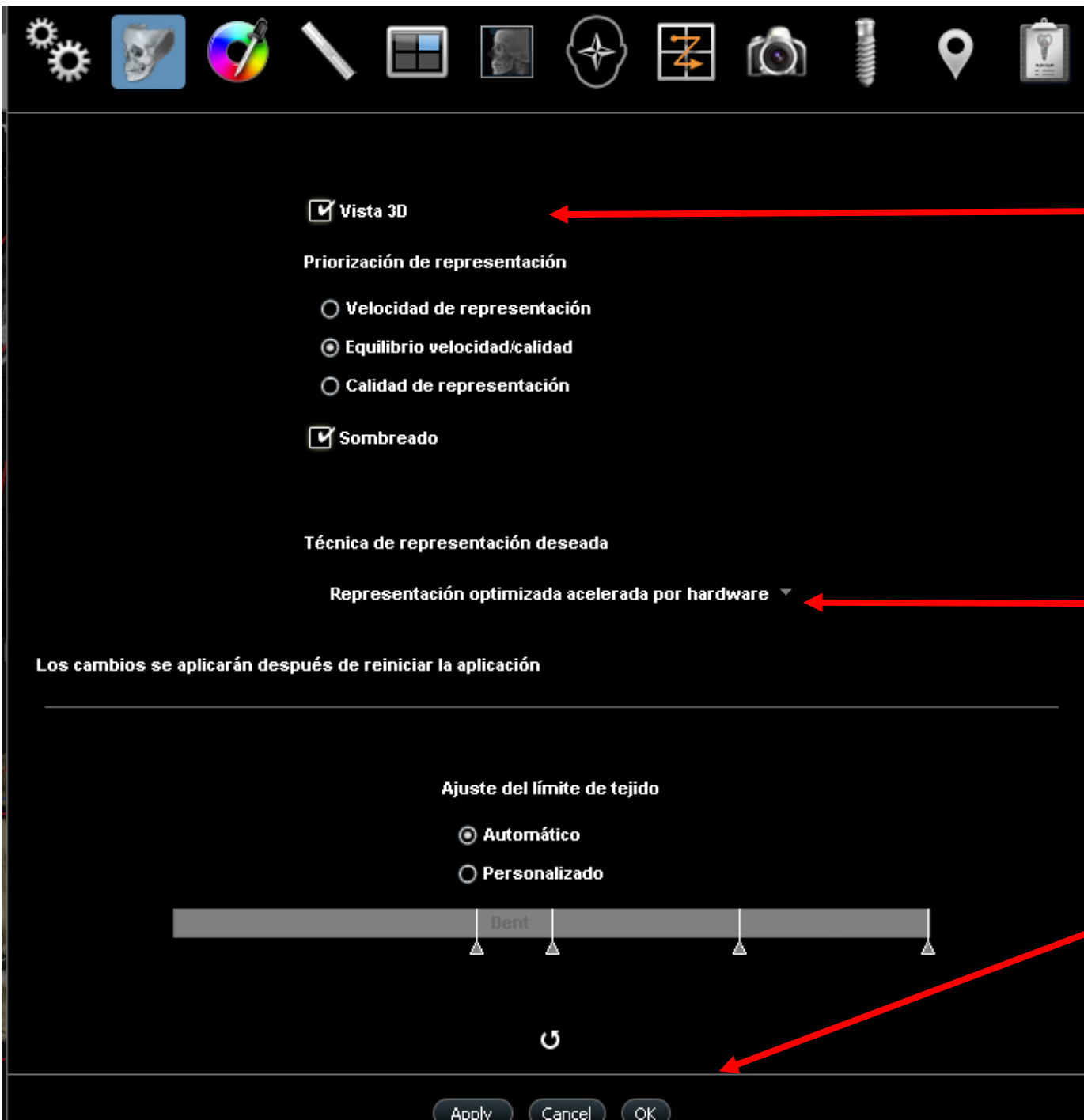

PALOMEAR DONDE
DICE VISTA 3D


MODIFICAR DONDE DICE
REPRESENTACION DE
SOFTWARE

LE DAMOS CLIC DONDE
DICE APLICAR O APPLY Y
DESPUES DAMOS CLIC EN
OK

Instalación de la galería de implantes

O TAMBIÉN SE LE
PUEDE DAR CLIC EN
LOGO DE DESCARGA


UNA VEZ ABIERTO EL
ARCHIVO DE LA
TOMOGRAFIA.
LE DAMOS UN CLIC EN
DONDE ESTA LA
IMAGEN DE UN
IMPLANTE

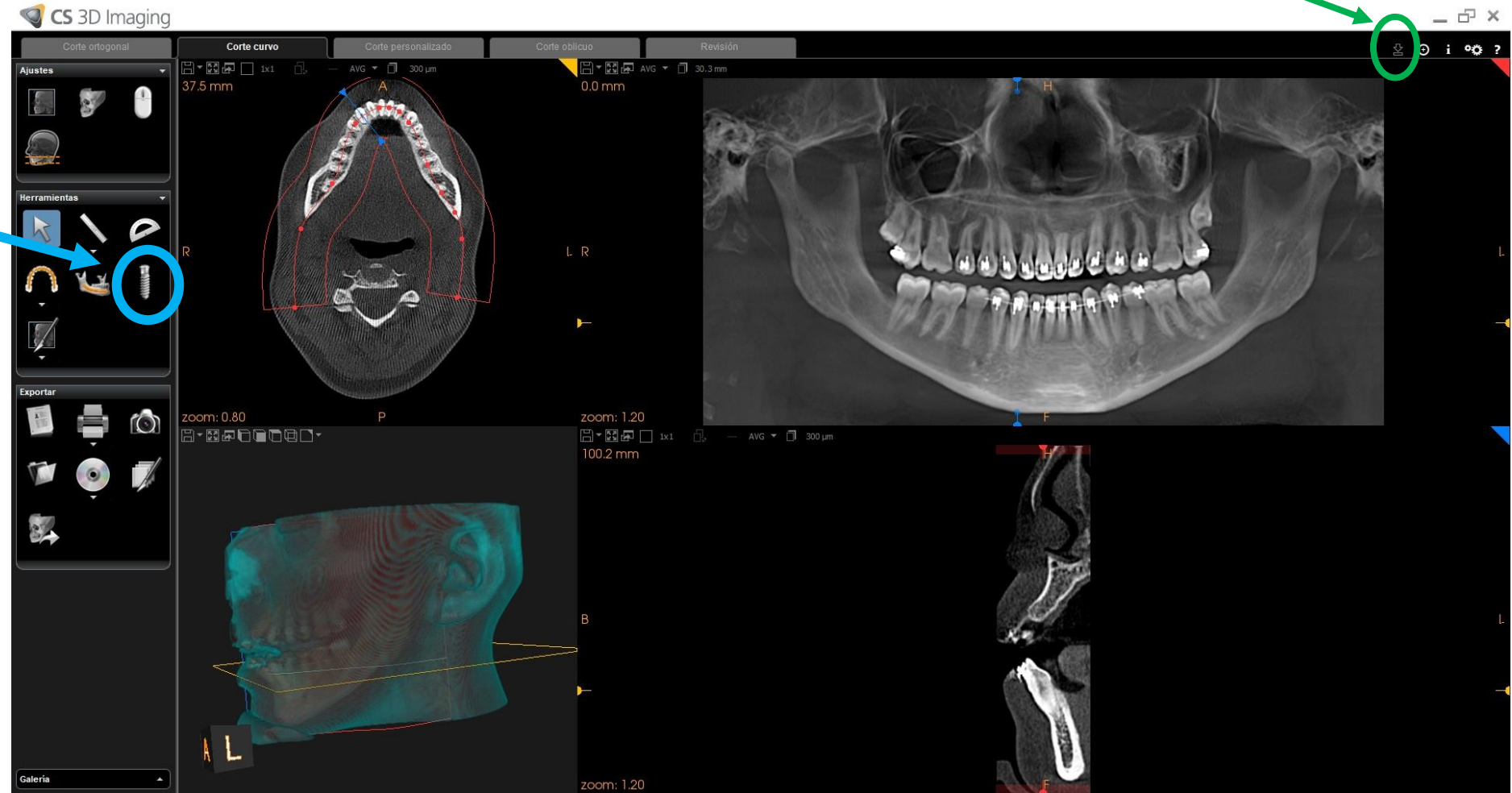

SE NECESITA INTERNET PARA ESTE PROCESO


PUEDE QUE OCURRA DOS SITUACIONES

1

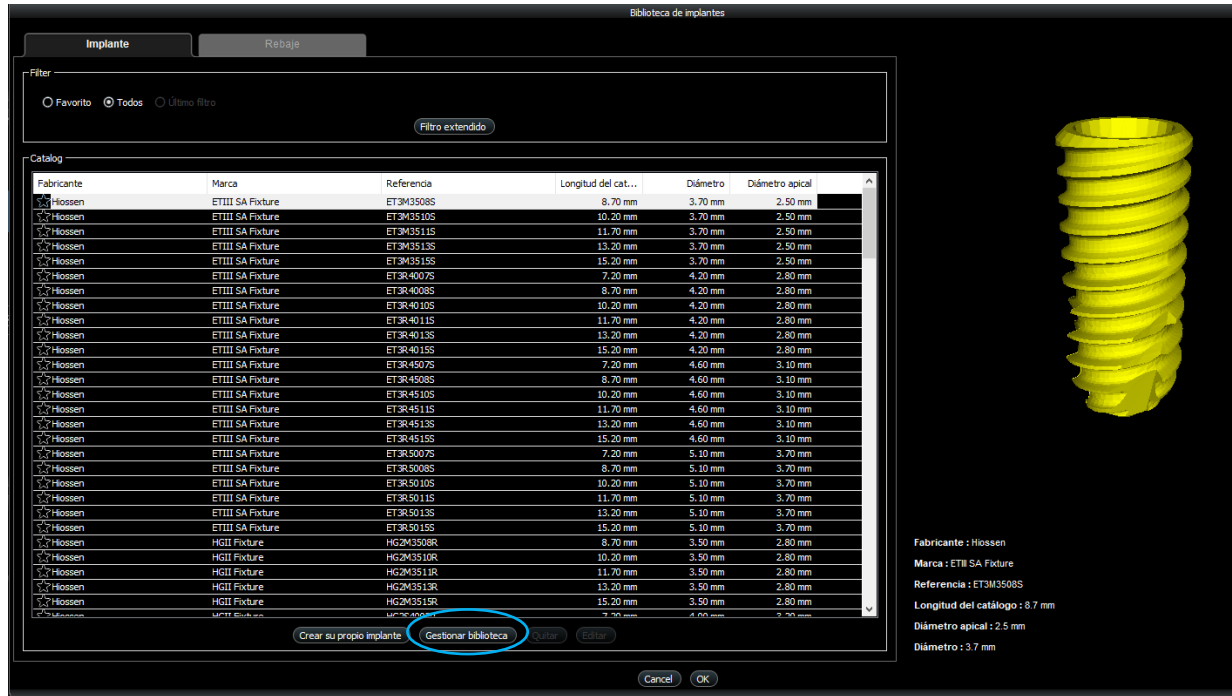


SI APARECE ESTA PANTALLA, LE DAMOS CLIC DONDE DICE GESTIONAR BIBLIOTECA Y LE DAMOS UNOS SEGUNDOS Y APARECERA UNA SEGUNDA PANTALLA

2

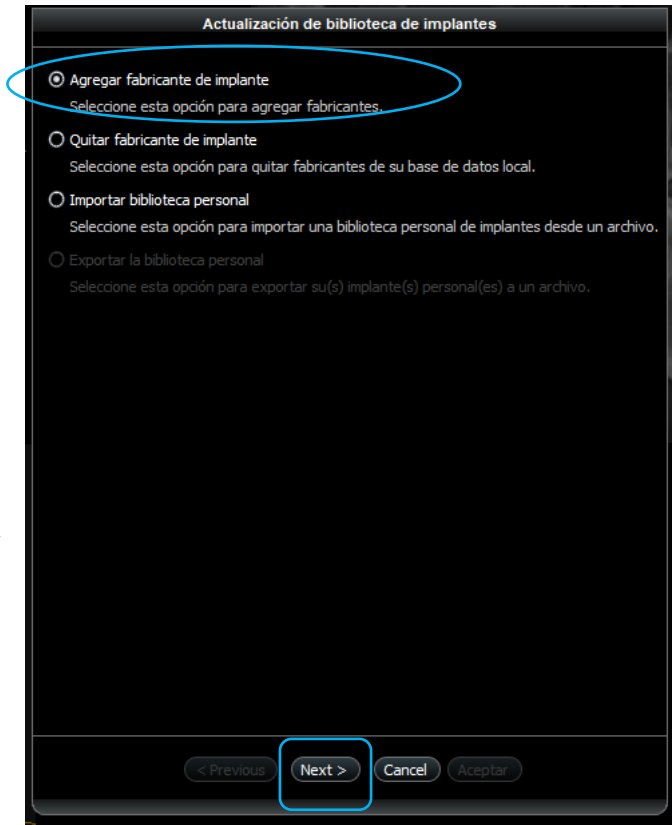

SI APARECIO ESTA PANTALLA DE PRIMERA INSTANCIA O FUE EL SIGUIENTE PASO DEL PRIMERA CASO, LE DAMOS CLIC EN DONDE DICE **AGREGAR FABRICANTE DE IMPLANTE** Y LUEGO EN DONDE DICE **NEXT**

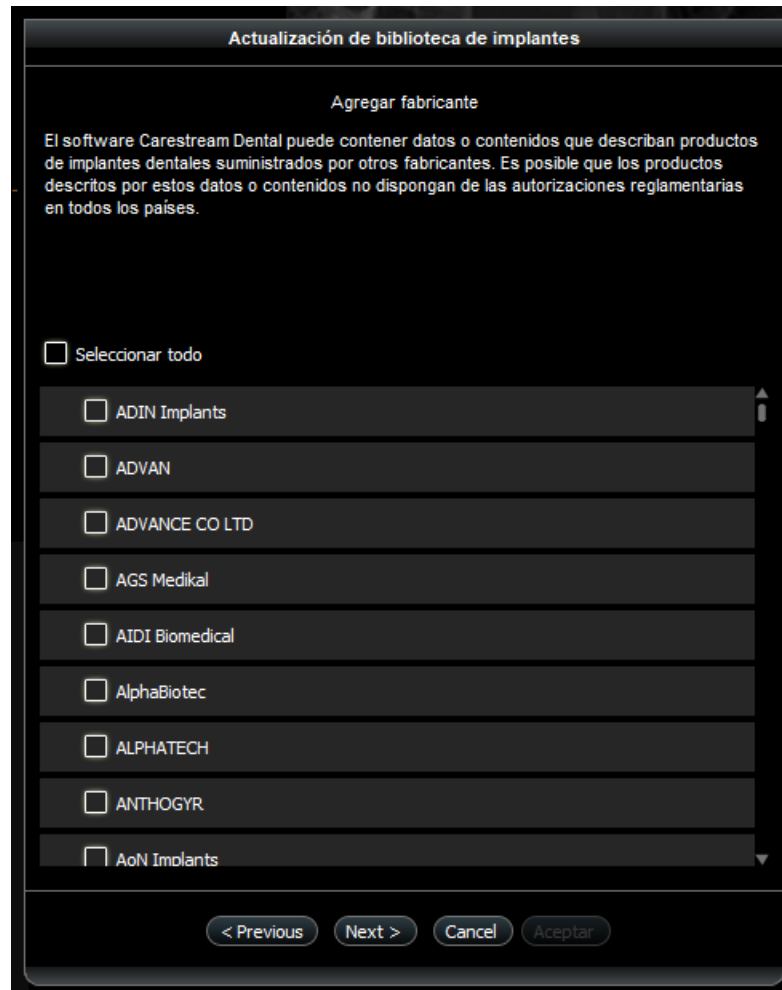

VA APARECER OTRA PANTALLA QUE DICE
ACTUALIZACION DE BIBLIOTECA DE
IMPLANTES

Y SOLO SELECCIONAMOS LA MARCA DE
IMPLANTES DESEADOS (LEONE,
HIOSSEN, ETC).

DE PREFERENCIA NO SE SELECCIONEN
TODOS PORQUE PODRIA HACER LENTO
EL PROGRAMA DE CS IMAGING

UNA VEZ TERMINADO DE
SELECCIONAR LAS MARCAS
DESEADAS DE IMPLANTES, LE DAMOS
EN DONDE DICE NEXT

ESTE PROCESO PUEDE DURAR ENTRE
30 MIN O MÁS, DEPENDIENDO LA
CANTIDAD DE MARCAS DE IMPLANTES
SELECCIONADAS